


TRULY®

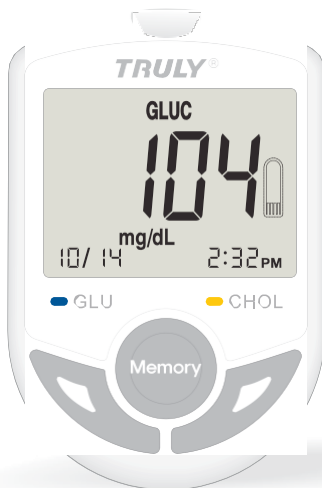

Model: TBG-460GC

Glucosa en Sangre / Colesterol 2
in 1. Sistema de Monitorizacion.

Manual de Uso
2012/03/12 Rev.00

www.boremed.com

Contenido

Capitulo 1 TBG-460 Sistema de Monitorizacion

• Introduccion.	2
• Precauciones.	2
• Uso.	3
• Etiquetado.	4
• Componentes del Sistema.	4

Capitulo 2 Configuracion del Dispositivo

2.1 Configurar Año/Mes/Dia/Hora/Minuto/Unidad de Medida.	6
---	---

Capitulo 3 Como realizar la Prueba

• Antes de la Prueba.	7
• Conecte el Dispositivo iOS a traves de Bluetooth.	9
• Realizar prueba de Glucosa en Sangre.	10
• Realizar prueba de Colesterol en Sangre	11
• Mensajes Especiales.	12
• Cuidados despues de la Prueba.	12

Capitulo 4 Control de Calidad..... 13

Capitulo 5 Funcion de Memoria 14

Capitulo 6 Instalacion / Sustitucion de las Pilas. 15

Capitulo 7 Almacenamiento. Manejo del dispositivo y las Tiras.... 16

Capitulo 8 Mensaje de Error y Correccion de las Pilas. 16

Capitulo 9 Especificaciones Tecnicas. 18

Capítulo 1 TBG-460 GC Sistema de Monitorización

1.1 Introducción

Gracias por elegir el Medidor de Glucosa / Colesterol 2 en 1. Por favor, lea atentamente el Manual de usuario para una correcta práctica y un uso seguro.

El sistema de monitorización de Glucosa / Colesterol en Sangre le proporciona, resultados plasma calibrados precisos basados en la tecnología de sentido electroquímico y el muestreo capilar superior. El sistema de supervisión de Glucosa / Colesterol en Sangre requiere sólo una pequeña cantidad de sangre, el resultado se calcula y se muestra con precisión.

Por favor, lea con atención el "Manual del Usuario" antes de utilizar el sistema de monitorización de Glucosa / Colesterol en Sangre. El "Manual del usuario" le guíara a través de los procedimientos de operación con instrucciones y ayudará a encontrar la información necesaria.

Por favor, póngase en contacto con el distribuidor local para preguntas y consultas.

ADVERTENCIA:

Por favor, lea atentamente las instrucciones de "Manual del usuario" con esto podrá familiarizarse con los procedimientos de prueba antes de utilizar el sistema. El usuario debe hacer una verificación de la calidad y consulte con un profesional de la salud antes de tomar cualquier decisión médica importante.

1.2 Precauciones

Tenga en cuenta las siguientes limitaciones para la obtención de resultados precisos de Glucosa / Colesterol Sistema de Monitorización de la Sangre

1. Las medidas son sólo para fines de referencia. Para un análisis de las mediciones, consultar a especialistas.
2. Sólo para uso en diagnóstico in-vitro (sólo para uso externo)
3. Para un solo uso, por favor, no vuelva a utilizar la tira de prueba
4. No utilice el dispositivo en Niños o Bebés.

5. Toque la tira con las manos limpias y secas; haga la punción para la prueba en un sitio limpio y seco.
6. No realice la prueba mientras utiliza un telefono movil, podria causar error de medicion con la interferencia de la señal electronica.
7. Si la concentración de oxígeno en el aire es baja puede hacer que la prueba no sea correcta, no hay ningún efecto de la altitud hasta 10.000 metros sobre el nivel del mar
8. La terapia médica para la inyección intravenosa, tales como los preparados de inmunoglobulina y las soluciones de diálisis peritoneal, que contiene compuestos de azúcar puede causar resultados superiores.
9. Los Hematocritos (Hct) van desde 30-55% que es aceptable. Unos Hct menos de 30% puede ser elevado. Unos Hct superiores al 55% puede provocar una disminución en los resultados de glucosa en comparación con referencia a la sangre.
- 10.No deje caer el producto.
- 11.Mantenga el dispositivo fuera del alcance de los niños
- 12.Mantenga el dispositivo y las tiras de prueba a temperatura ambiente entre (10-30°C).

1.3 Uso Previsto

El dispositivo Glucosa /Colesterol en la Sangre TBG-460GC está destinado a ser utilizado para la medición cuantitativa del nivel de glucosa en sangre y los niveles de colesterol en la sangre entera capilar recién extraída de la yema del dedo. Está diseñado para ser utilizado fuera del cuerpo (diagnóstico in vitro). Se debe usar sólo como una ayuda para controlar la glucosa en sangre y el nivel de colesterol por personas en el hogar y por los profesionales de la salud en entornos clínicos.

1.4 Etiquetado e Informacion



No lo vuelva a usar



Lea las Instrucciones



Mantengalo Seco



Precaucion, consulte los documentos adjuntos

Operation



Limitación de la temperatura de funcionamiento

Storage



Límite de temperatura



Diagnóstico in vitro



Representante de la EU



Número de lote



Número de catálogo
(Número de producto)



Uso por




Fabricado por



0123 Certificación CE

1.5 Componentes del sistema

Dispositivo (Parte Frontal)

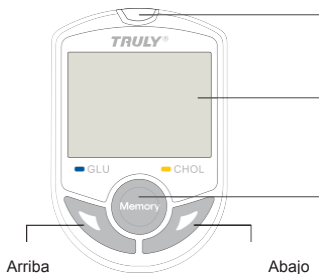

Prueba de Puerto de la tira:

Inserte la tira de prueba aquí.


El medidor se encenderá automáticamente.

Pantalla LCD:

Para la visualización de la información de funcionamiento y los resultados de las pruebas.

Boton de Memoria:
Introduzca Operacion modo de memoria

Dispositivo (Parte Trasera)

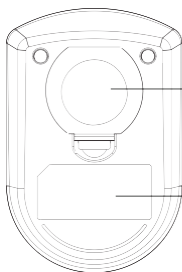

Tapa de la batería:
Batería de litio de 3V

Etiqueta:
Muestra información
sobre el dispositivo

Tira de prueba de glucosa (Color azul)

Calibrador:

Inserte el Calibrador de la tira reactiva en el puerto de prueba del medidor para activarlo.



Entrada de la muestra:

La entrada donde se pone una gota de sangre o una solución de control. Poniendo una muestra de sangre o solución de control dará como resultado la medición en el dispositivo de forma automática.

Tira de prueba del colesterol (color

Calibrador:

Inserte el Calibrador de la tira reactiva en el puerto de prueba del medidor para activarlo.

Sample Inlet :



Entrada de la muestra:

La entrada donde se pone una gota de sangre o una solución de control. Poniendo una muestra de sangre o solución de control dará como resultado la medición en el dispositivo de forma automática.

Al menos se necesitara 10uL de sangre para que la medición se realice.


Zona de
Reacción: La
zona de
reacción de
Colesterol Total

Código (Vista Frontal)

Barra de Contacto:
Inserte este extremo en el puerto de prueba del medidor.

Modo de Prueba:
GLUC - Glucosa
CHOL - Colesterol
Total

Numero de Código

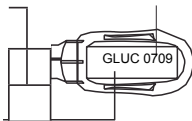

Capítulo 2 Configuración del medidor

2.1 Configurar Año / Mes / Día / Hora / Minutos / Unidad de Medida

Mantenga pulsado el botón de "memoria" durante más de tres segundos, el medidor emitirá un pitido y entrará en el modo de ajuste. Por favor, siga las instrucciones para configurar el medidor. En el modo de configuración, la pantalla LCD del medidor muestra todos los elementos de ajuste parten de un año intermitente "20XX" y los elementos de configuración de descanso son las siguientes:



Ajuste el Año

- Cuando el medidor entre en el modo de ajuste, el primer elemento de la pantalla, como "2008" parpadeará en la pantalla, lo que significa año.
- Pulse el botón arriba / abajo hasta que aparezca el año correcto.
- Después de establecer el número de años que desee, pulse el botón de "memoria" de nuevo, el segmento de año empieza a parpadear.



Ajuste el mes

1. Pulse el botón arriba / abajo hasta que aparezca el mes correcto
2. Pulse el botón de "memoria", y luego el segmento de mes empieza a parpadear.



Ajuste el día

1. Pulse la tecla Arriba / Abajo hasta que aparezca el día correcto.
2. Pulse el botón de "memoria", y el segmento de día empezará a parpadear.



Ajuste la hora

1. Pulse arriba / abajo hasta que aparezca la hora correcta.
2. Pulse el botón de "memoria", y el segmento de hora comenzará a parpadear



Ajuste los minutos

1. Pulse arriba / abajo hasta que aparezca el minuto correcto.
2. Pulse el botón de "memoria" y el segmento de minutos empieza a parpadear.



- Pulse el botón arriba / abajo hasta que aparezca la unidad de medida correcta
Pulse el botón de "memoria" mostrará "OFF" en la pantalla y se apagará.


Capítulo 3 Cómo realizar la prueba

3.1 Antes de la Prueba

Codificar el Dispositivo

El Dispositivo TBG-460GC debe codificarse antes de probar con las tiras de prueba, por primera vez, o cada vez que se utilice una nueva caja de tiras de prueba. Cada vial de tiras de prueba tiene un número de código asignado. La tira del código se empaqueta con la tira de prueba con el fin de calibrar / codificar el Dispositivo. Cada vez que se inserta una tira de prueba, por favor, asegúrese de comprobar que el número de código que aparece en la pantalla es el mismo que el número de código indicado en el frasco de tiras reactivas.

Instrucciones:

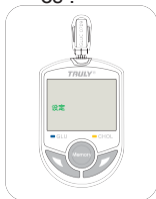

1. Introduzca la tira del código en el puerto de prueba del medidor. Espere a que el número de código y el modo de prueba para que aparezca en la pantalla.






2. Asegúrese de que el número de código en la pantalla es el mismo que el número de código en la tira de código, y el modo de prueba es también la misma como se indica en el vial de la prueba. Retire la tira de codificación. "" Debe aparecer en la pantalla, lo que indica que el medidor ha sido codificado con éxito.





Precauciones:

Si "E-E" aparece en la pantalla durante el proceso de codificación, puede haber un problema con la tira de codificación o una categoría franja código incorrecto puede ser mal utilizada. Lleve a cabo los procedimientos de codificación nuevo, y si "E-E" sigue apareciendo, póngase en contacto con el distribuidor autorizado más cercano.

Use of Lancing Device

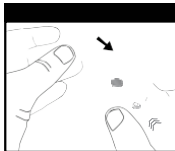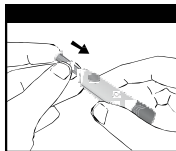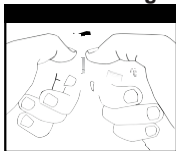

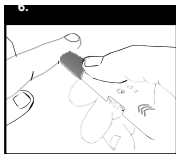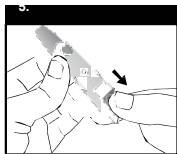

1. Retire la tapa empujándola suavemente hacia abajo y lejos del dispositivo de punción
2. Inserte la lanceta en el hueco que ha dejado la tapa. Apriete hasta que vea que ha quedado bien colocada. Retire la protección de plástico de la punta de la lanceta.
3. Vuelva a colocar la tapa tirando hacia atrás sobre el cuerpo del dispositivo de punción.
4. Seleccione la profundidad de penetración en la piel girando el selector de profundidad hasta que el número deseado puede verse en la ventana de selección. Hay 5 niveles de penetración en la piel: Cuanto mayor sea el número, más profundo se pincha
5. Tire de la parte situada en la parte posterior del dispositivo hasta que se detenga y luego suelte
6. Coloque el dispositivo de punción firmemente contra el dedo y pulse el botón de liberación para obtener una muestra de sangre. Después de terminar el análisis de sangre, deseche la lanceta usada con seguridad en un recipiente apropiado.

3.2 Conecte el dispositivo iOS a través de Bluetooth

1. Instalacion

Antes del primer uso, Descargar e instalar "BOREMED" aplicación en su dispositivo iOS. (4.0 compatible con Bluetooth, por ejemplo, iPhone 4S, iPhone 5, NewiPad y iPadMini)


2. Abra "BOREMED" la aplicación y, a continuación, pulse el icono de la presión arterial en la pantalla de medición.



2. Pulse el botón "Glucosa y Colesterol".

3.3 Realice la prueba de glucosa en sangre


Instrucciones :

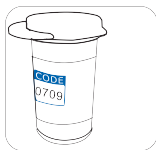

1. Inserte una tira de prueba de glucosa en sangre (color azul) en el puerto de la tira de prueba del medidor y cubrir inmediatamente el vial para mantener las tiras en estado seco. El medidor se encenderá automáticamente




2. Tenga cuidado para asegurarse de que el modo de prueba y el número de código en la pantalla son los mismos que la marcada en el frasco de tiras reactivas. Icono "GLUC" y "COL" indican el modo de glucosa y colesterol total respectivamente. Si no, retire la tira de prueba y vuelva a intentarlo.

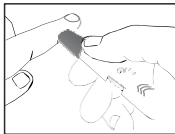

3. Obtener una gota de sangre con un dispositivo de punción. No apriete la punta del dedo para obtener una gota de sangre. Puede influir en el resultado.



4. Toque la entrada de la tira de prueba con la gota de muestra de sangre hasta que el medidor emite un "beep", lo que significa que la muestra ha entrado en la tira con éxito.

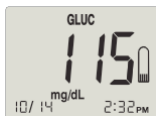

5. La pantalla mostrará una cuenta atrás de 10 segundos para la prueba de glucosa.



6. Cuando se complete la medición, el valor de glucosa se mostrará en el monitor de glucosa en la sangre y también en pantalla de la aplicación iOS.

3.4 Realice la prueba de Colesterol total

1. Inserte una tira de prueba del colesterol total (color amarillo) en el puerto de la tira de prueba del Dispositivo y seguir el procedimiento que se realiza la prueba de Glucosa en sangre.
2. Asegúrese de obtener suficiente volumen de muestra de sangre
3. La pantalla mostrará una cuenta atrás de 26 segundos en las pruebas de colesterol.

Nota :

1. El Sistema de Monitorización TBG-460GC incluye test de Glucosa y Colesterol Total y han sido calibrados con plasma. El usuario no tiene que convertir los resultados dados que estos vienen especificados en unidades de plasma mg/dL.
2. Utilice las tiras antes de la fecha de caducidad, las tiras se pueden utilizar solamente en los 3 meses la vida útil restante después de la primera apertura del frasco.
3. Aplique la muestra de sangre en la posición correcta de la tira con precisión, seguir las indicaciones para evitar operaciones incorrectas
4. Prohibido hacer la prueba dos veces en la misma tira, causara resultados erróneos.

3.5 Mensajes Especiales

Modo	Lo	Hi
Glucosa	< 20 mg/dL (1.11 mmol/L)	> 600 mg/dL (33.3 mmol/L)
Colesterol Total	< 100 mg/dL (2.59 mmol/L)	> 400 mg/dL (10.35 mmol/L)

3.6 Cuidados después de la prueba

Instrucciones:

- 1 El uso inadecuado del dispositivo, como caídas, golpes o cualquier otro impacto violento puede causar daños.
- 2 Por favor, mantenga el dispositivo a distancia por interferencias magnética, electromagnética y radiactiva.

Advertencia :



1. No desmontar el dispositivo por cualquier motivo.
2. Siga las normativas locales para desechar las tiras reactivas y lancetas usadas.
3. Tiras reactivas, lancetas usadas y otros materiales que hayan estado en contacto con sangre deben ser tratados como potencialmente biopeligrosos. Si un usuario tiene una enfermedad infecciosa, las tiras de ensayo utilizados y otros materiales podrían ser una fuente de infección.

Capítulo 4 Control de Calidad

Intencion de Uso:

La solución de control se usa para comprobar las características del Sistema Truly, incluye Glucosa en sangre, ácido úrico y sistema de monitorización del colesterol, según cual sea el perfil de pruebas del usuario. El sistema está funcionando adecuadamente, si el resultado de la prueba de solución de control está dentro del rango de control indicado que aparece en la etiqueta del envase de tiras de prueba

Procedimiento prueba de control:

1. Cuando se sospecha que el Dispositivo o las tiras reactivas no están funcionando correctamente.
2. Cuando la glucosa en la sangre o el ácido úrico, los resultados de las pruebas de colesterol no son coherentes con lo que siente, o si usted piensa que sus resultados no son exactos
3. Cuando usted deje caer o golpee el dispositivo
4. Por consejo del profesional sanitario.

Cómo realizar una prueba de control

1. Inserte una tira reactiva en el puerto de la tira de prueba del medidor y cerrar inmediatamente el frasco de tiras para que su estado permanezca seco
2. Tenga cuidado para asegurarse de que el modo de prueba y el número de código en la pantalla son los mismos que la marcada en el frasco de tiras reactivas. Si no es así, retire la tira de prueba y codifique el dispositivo para corregir el modo de prueba y el número de código.
3. Agite el frasco de solución de control con fuerza a continuación, abra la tapa, descartar las tres primeras gotas de la solución de control, después de limpiar la punta de distribución y limpiar con un pañuelo y luego soltar un poco de solución de control sobre un objeto limpio. Si se trata de una prueba de colesterol, por favor deposite la solución de control suficiente (al menos 10uL).
4. Toque la muestra de entrada de la glucosa o de ácido úrico, colesterol tira reactiva a la gota de solución de control hasta que el medidor emite un "beep", la pantalla mostrará una cuenta atrás de 10 segundos en la tira de prueba de glucosa o 15 segundos para la prueba de ácido úrico Strip o 26 segundos para que la tira de prueba del colesterol.
5. Después de la cuenta atrás, la pantalla mostrará los resultados de las pruebas de control, comparar los resultados con el rango de control que aparece en el frasco de tiras reactivas.

Advertencia:

- Por favor, lea atentamente este manual del usuario para la prueba de solución de control antes de su uso
- No vuelva a usar las tiras reactivas y cierre bien la tapa de las tiras de prueba después de su uso.
- Las tres primeras gotas de la solución de control deben ser descartados y el vial debe agitarlo bien antes de usarlo, cuando el vial ha sido abierto recientemente.
- Marque el vial de nueva apertura de la solución de control y de las tiras de prueba con la fecha de apertura
- Solución de control de glucosa se utiliza para el modo de prueba de la glucosa, la solución de control de ácido úrico se utiliza para el modo de prueba de ácido úrico. Y la solución de control de colesterol es utilizado para el modo de prueba de colesterol.
- Si los resultados de la prueba están fuera del rango de control, por favor confirmar y repetir la prueba, si todavía quedan fuera del rango, por favor póngase en contacto con un distribuidor autorizado para obtener ayuda y servicio
- Las soluciones de control no son incluidos en el sistema, por favor póngase en contacto con su distribuidor si desea hacer una prueba de control de calidad

Capítulo 5 Funcion de memoria

El Dispositivo TBG-460GC almacena automáticamente hasta 360 resultados de prueba de glucosa y 50 resultados de la prueba de colesterol. También le proporciona semanal (7, 14, 21) y los promedios de 28 días de los resultados de las pruebas de glucosa en sangre. Por favor, siga estas instrucciones para recordar los resultados almacenados

Instrucciones :

1. Este seguro que la tira de prueba no esta metida en el puerto de medición.
2. Pulse el botón de "memoria" una vez, para encender el medidor.

Después de un corto sonido "beep" aparecerá una pantalla completa que el medidor entra en modo de espera.

Nota :

La función de medio día se puede aplicar a modo de prueba de la glucosa sólo, el modo de prueba de colesterol total no tiene la función de medio día

3. Pulse el botón de "memoria" de nuevo y el Dispositivo se queda en modo de memoria. El promedio de 7 días aparecerá en la pantalla.
4. Cuando presiones el boton de "memoria" seguidamente aparecera 14, 21 y 28 dias de media.

5. Después de la 28 días de la media, el último resultado almacenado M01 aparece en la pantalla. A continuación, puede leer el resultado almacenado de M01 a M360 (modo de glucosa) o de M01 a M50 (modo colesterol) pulsando botón ARRIBA o ABAJO.
6. Pulse el botón de "memoria" durante más de 3 segundos y el medidor se apagará después de un largo sonido "beep". El Dispositivo también se apagará automáticamente después de 3 minutos sin realizar ninguna operación

Nota :


Si los resultados de 360 pruebas ya están almacenados y se añade uno nuevo, el resultado más antiguo de prueba se sobrescribirá automáticamente. El resultado más reciente se muestra en la M01.

Capítulo 6 Instalación / Sustitución de las pilas

Pilas

Una Pila de litio de 3V (CR2032) se incluye en el paquete del dispositivo. Utilice únicamente las pilas de litio de 3V. No use ni cambie la pila con otras diferentes. Si lo hace, puede dañar los componentes electrónicos del dispositivo.

Instrucciones :

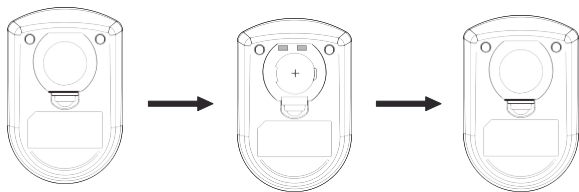

1. Sostenga el dispositivo con una mano, levante ligeramente la tapa cubierta posterior para abrir la tapa posterior.
2. Inserte una pila nueva en el dispositivo con el lado "+" hacia arriba, escuchará un sonido "bip" que indica que el dispositivo está listo.
3. Colocar de nuevo la cubierta en el dispositivo

Capítulo 7 Almacenamiento y Manejo del Dispositivo y las tiras

Sensible al calor y la humedad, el rendimiento de tiras de prueba puede verse afectada por el almacenamiento y la manipulación incorrecta. Guarde las tiras reactivas y el medidor cuidadosamente de acuerdo a las especificaciones indicadas en el capítulo 8.

Nota:

- Guarde el dispositivo, la tira de código, las tiras de ensayo a temperatura ambiente. No los exponga más allá del rango descrito en el Capítulo 8
- No congele ni refrigere el dispositivo y las tiras.
- Mantenga el dispositivo limpio, limpiando el exterior con un pañuelo de papel o un paño sin pelusa.

Capítulo 8 Mensaje de error y Solución de problemas

Mensaje	Causa	Solucion
E-0	Habrà un problema con la tira de prueba.	Repita la prueba con una nueva tira reactiva. Si el problema persiste, póngase en contacto con el distribuidor.
E-9	La tira de prueba se puede quitar después de aplicar la sangre en el canal absorbente.	Repita la prueba e inténtelo de nuevo con una nueva tira reactiva. Si el problema persiste, póngase en contacto con el distribuidor.
E-b	La energía de la batería es demasiado baja para realizar una prueba	Reemplace la pila
E-A	La tensión de referencia u otro circuito da error	Llame al distribuidor local autorizado para obtener ayuda y servicio.

Mensaje	Causa	Solucion
E-E	2 Puede haber un problema con la auto-comprobación del dispositivo 3 El uso de la tira de codificación es errónea, esta dañada, o la tira de código fue insertado incorrectamente.	Apaguelo y vuelva a intentarlo, si el error vuelve a aparecer, comuníquese con el distribuidor autorizado más cercano. Compruebe que el número de código en la pantalla del medidor coincida con el número de código del frasco de tiras reactivas. Codificar el dispositivo o reseteelo según sea necesario. Si vuelve a aparecer el mensaje de error, póngase en contacto con el distribuidor.
E-t & temperatur a Icono de la muestra	La temperatura está por debajo de o por encima del sistema de rango de funcionamiento.	Repita la prueba después de que el dispositivo y la tira de prueba han alcanzado la temperatura dentro de la rango de funcionamiento.
E-U	Puede ser causado por una tira reactiva usada temporal o permanente problema electrónico.	Repita la prueba con una nueva prueba. Si el mensaje de error aparece de nuevo, póngase en contacto con el distribuidor.
HI	– Nivel de glucosa en sangre es superior a 600 mg / dl. – La tira reactiva tiene problemas	1 Lea las instrucciones e inténtelo de nuevo con una nueva tira reactiva. 2 Revise el frasco de tiras de prueba para asegurarse de que no sobrepasa la fecha de caducidad.
Lo	3 Nivel de glucosa en sangre es inferior a 20 mg / dl. 4 La tira reactiva tiene un problema	1 Lea las instrucciones e inténtelo de nuevo con una nueva tira reactiva. 2 Revise el frasco de tiras de prueba para asegurarse de que no sobrepasa la fecha de caducidad.

Capítulo 9 Especificación

Precisión del sistema	$\pm 20\%$ en el nivel de glucosa ≥ 75 mg / dl (4.17mmol / L) $\pm 20\%$ en el colesterol total ≥ 150 mg/dl (3.88mmol / L)
Principio	Biosensor Electroquímico
Calibracion	Plasma-equivalente
Muestra de Ensayo	Sangre total capilar fresca
Tiempo de medición	Cerca de 10 segundos (Glucosa), 26 segundos (Colesterol Total)
Intervalo de medición	Glucosa 20 a 600 mg / dl (1,1 a 33,3 mmol / L) Colesterol Total 100 - 400 mg / dl (2,59 a 10,35 mmol / L)
Volumen de la muestra	Sobre 1 - 1.5 μ L (Glucosa) Sobre 10 μ L (ColesterolTotal)
Rango Hematocrito	30 - 55% (para la glucosa) 35 - 50% (para el colesterol total)
Condiciones de almacenamiento	10 - 30°C (50 - 86°F)
Temperatura de la operación	10 - 40°C (50 - 104°F)
Humedad Relativa	Menos de 95%
Memoria	360 para la glucosa, 50 para el colesterol total
Tipo de pila	Una de 3V (CR2032) Pila de litio
Duración de la batería	Aproximadamente 1000 pruebas
Dimensiones	82 * 54 * 21.5mm (longitud, anchura, altura)
Peso	Sobre 45 g (con pila)



Truly Instrument Ltd
2/F., Chung Shun Knitting Centre, 1-3 Wing Yip St,
Kwai Chung, N.T., HONG KONG
Tel: (852) 2487 9803
Fax: (852) 2146 5756
Http: www.trulyinstrument.com

EC – Representative: Wellkang Ltd
t/a Wellkang Tech Consulting Suite
B, 29 Harley Street, LONDON W1G
9QR,
United Kingdom

